

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Тренажер для пресса Live Active U-Slender



Пояс U-Slender использует современную технологию ЭМС – электростимуляцию мышц для придания им тонуса, формы, силы, а так же для их укрепления и подтянутости. Похудейте и приведите мышцы пресса и ягодиц в тонус!

U-Slender это:

- Стимуляция мышц брюшного пресса технологией мышечной электростимуляции (ЭМС)
- Стимуляция нервных окончаний в зоне брюшного пресса, вызывающая сокращение и расслабление мышц
- Придание тонуса и укрепление мышц пресса и ягодиц без интенсивных упражнений
- Имитация приседаний и скручиваний, помогающая укрепить мышцы пресса
- Придание более стройного и очерченного образа талии и бедрам.
- Улучшение состояния мышц
- Экономия времени на стандартных тренировках в любое время и в любом месте

Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать пояс в дополнение к тренировкам дома или в тренажерном зале.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а так же людьми нечувствительными к высоким температурам.

- **Прибор НЕ предназначен для использования беременными женщинами**
- Использовать прибор **ТОЛЬКО** по назначению
- Людям с медицинскими ограничениями необходимо обратиться за консультацией к врачу перед использованием прибора
- Следует незамедлительно прекратить использование прибора, если в процессе проявляются необычные симптомы
- **НЕ** устанавливать штифты
- **НЕДОПУСТИМО** использование прибора в качестве игрушки. Необходимо пристальное внимание при использовании прибора детьми или рядом с ними.
- **НЕ** пытайтесь разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному электрику. Некорректная сборка или ремонт могут вызвать риск возникновения электрошока или травмы в процессе использования прибора.
- **НЕ** погружать прибор в воду или иную жидкость.
- Продолжительное использование прибора в режиме высокой интенсивности может привести к ожогам на коже
- **Не** использовать в ванной комнате.

Даже на строгой диете мышцы склоны к потере тонуса и обвисанию, нарушая контуры тела. Мышцы брюшного пресса – одна из зон, сложно поддающихся формированию, а вибропояс U-Slender – идеальный помощник!

U-Slender помогает вернуть 'рыхлым' мышцам их естественное упругое состояние с помощью воздействия электростимуляции на нужные зоны. Благодаря портативности и простоте использования U-Slender Вы сможете похудеть и подтянуть контуры тела, не отрываясь от повседневных дел: чтение, прогулки или работа по дому. Все просто! Вам потребуется лишь полчаса в день, чтобы улучшить форму, особенно в зоне пресса, подтянуть кожи рук, бедер, линии декольте и ягодиц. Причем эти 30 минут никак не помешают вашему расписанию.

В сочетании с обычными тренировками U-Slender помогает вернуть упругость мышц посредством интенсивного сокращения. Такое действие приводит к лучшему и более заметному рельефу мышц. Все просто!


ПРЕИМУЩЕСТВА U-SLENDER:

- Стимуляция мышц брюшного пресса технологией мышечной электростимуляции (ЭМС)
- Стимуляция нервных окончаний в зоне брюшного пресса, вызывающая сокращение и расслабление мышц
- Придание тонуса и укрепление мышц без интенсивных упражнений
- Имитация приседаний и скручиваний, помогающая укрепить мышцы
- Придание более стройного и очерченного образа в зоне брюшного пресса
- Улучшение состояния мышц
- Экономия времени на стандартных тренировках в любое время и в любом месте
- Очевидный эффект при использовании прибора в дополнение к тренировкам в домашних условиях или в тренажерном зале






КОМПЛЕКТАЦИЯ

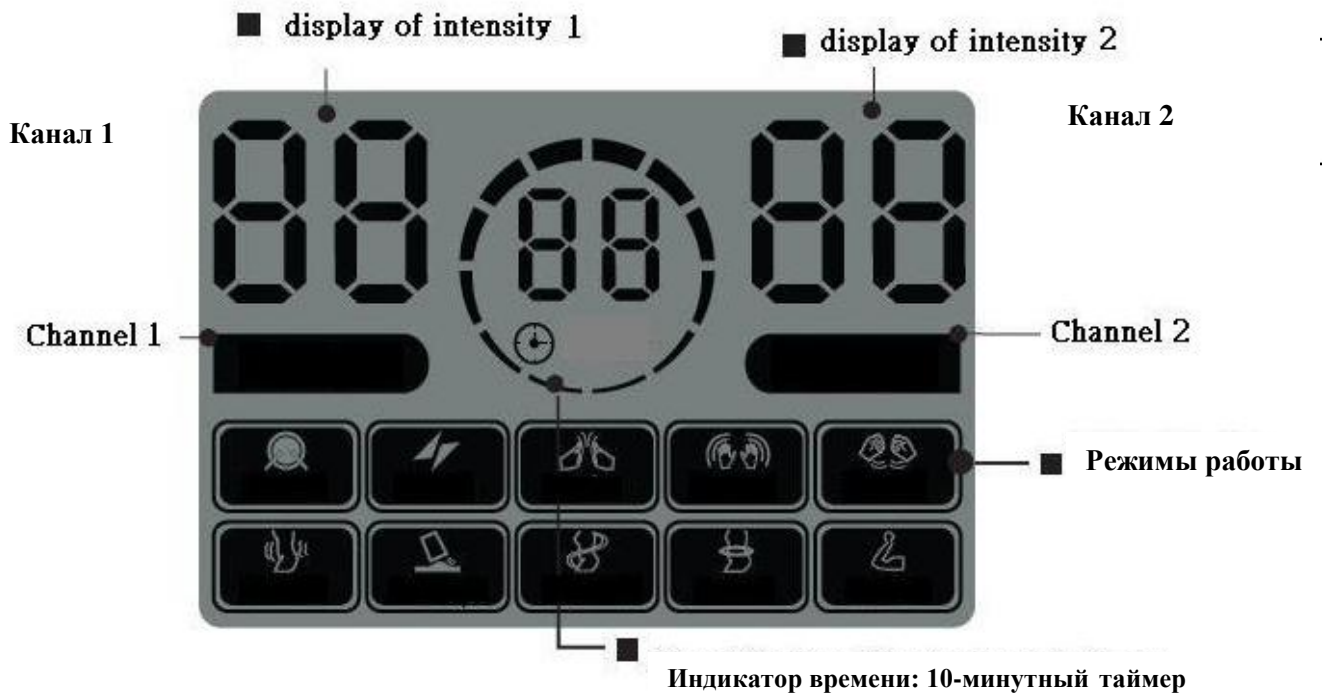- Массажный пояс с силиконовыми электродными подушечками
- Ручной пульт управления
- Сумка-переноска
- Инструкция по применению


РУЧНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



ИНДИКАТОРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

	Включение / выключение
	(Левая сторона) Кнопка настройки интенсивности канала 1 +/-: для усиления или ослабления интенсивности работы
	(Правая сторона) Кнопка настройки интенсивности канала 2 +/-: для усиления или ослабления интенсивности работы
	Выбор предыдущего режима
	Выбор следующего режима

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

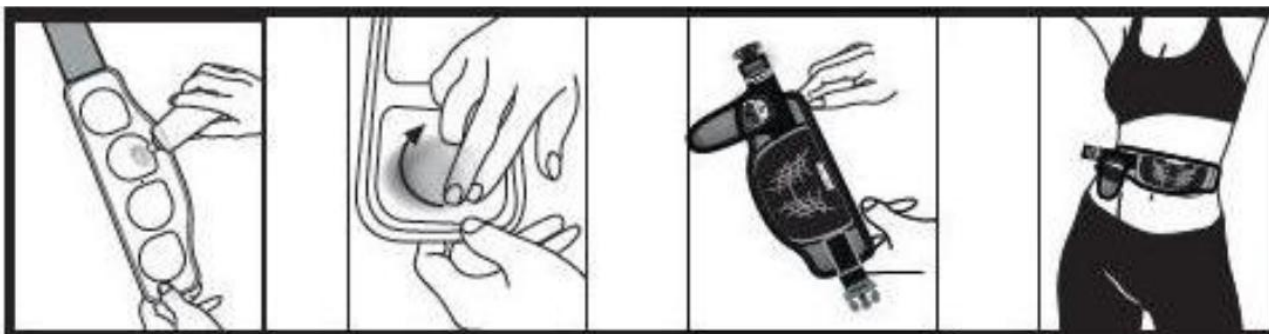

- Извлеките пульт управления и снимите крышку с отсека для батареек, установите 2 новые батарейки размера AA, закройте крышку.
- Добавьте пару капель обычной воды на силиконовые электродные подушечки и равномерно распределите. Так же можно использовать различные массажные гели на водной основе.
- Оберните U-Slender вокруг талии или ягодиц (электродные подушечки должны касаться кожи, иначе Вы не ощутите никакой стимуляции), отрегулируйте размер пояса и застегните его.

- Включите прибор нажатием кнопки включения, процесс будет сопровождаться звуковым сигналом.
- Загорится ЖК экран, затем Вы сможете выбрать режим работы нажатием кнопки P + или P - .
- Затем выберите интенсивность Канала 1 или Канала 2 нажатием кнопки +/-.
- Прибор снабжен автотаймером, который начнет отсчитывать 10- минутный массаж, затем автоматически отключится.
- Вы в любой момент можете отрегулировать настройки. При повторной настройке режима интенсивность сойдет на «0». Отрегулируйте ее до нужного Вам уровня.
- Для остановки массажа Вы можете отключить прибор в любое время, нажав и удерживая кнопку выключения несколько секунд.



ПРИМЕЧАНИЕ: БАТАРЕЙКИ

- Не используйте батарейки разного типа, а также сочетание старых и новых батареек. Во избежание риска протечки взрывоопасных веществ никогда не перезаряжайте батарейки, не подвергайте тепловому воздействию и не разбирайте их.
- Если Вы не используете прибор и пульт ручного управления, извлеките их из прибора во избежание их саморазряда. Если из батареек вытекает жидкость, выкиньте их и тщательно протрите отделение для батареек сухой тряпкой. Замените батарейки на новые.
- Прибор снабжен функцией энергосбережения: если Вы включили прибор, но в течение 1 минуты не было контакта с телом, прибор автоматически отключится.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

<i>Проблема</i>	<i>Причина</i>	<i>Решение</i>
<i>Нет изображения на дисплее</i>	• Не установлены батарейки	• Установите батарейки
	• Батарейки установлены некорректно	• Проверьте полярность установленных батареек
	• Батарейки разряжены	• Замените батарейки
<i>Дисплей активен, но не функционирует</i>	<ul style="list-style-type: none"> • нет контакта с кожей • прибор некорректно зафиксирован на массажных подушечках • режим интенсивности установлен на «0» • микропроцессор не отвечает • низкий заряд батареек 	<ul style="list-style-type: none"> • используйте воду или гель на подушечках и установите подушечки прямо на кожу • нажмите кнопку включения для усиления интенсивности • перезагрузите прибор, вынув батарейки на 1 минуту, повторно установите батарейки • замените батарейку

<p><i>Дисплей в нормальном состоянии, но ничего не происходит</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • установлен низкий уровень интенсивности • пояс установлен некорректно • износ пояса или наличие жирных следов на нем • низкий заряд батарейки 	<ul style="list-style-type: none"> • несколько раз нажмите кнопку включения для увеличения интенсивности • переместите пояс на необходимые зоны воздействия • протрите пояс чуть влажной салфеткой, устраните загрязнения • замените батарейку
<p><i>Ни одна клавиша не работает</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • микропроцессор не отвечает • низкий заряд батарейки 	<ul style="list-style-type: none"> • перезагрузите прибор, вынув батарейки на 1 минуту, повторно установите батарейки • замените батарейку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название изделия	U-Slender
Модель №	MC0296
Электропитание	2 x 1.5В батарейки AA
Генерация частоты	1- 60 Гц
Максимальное напряжение на выходе	85 В (1К нагрузочное сопротивление)
Максимальный ток на выходе	8.5 МА (1К нагрузочное сопротивление)
Энергопотребление	0.25 Вт
Размеры основного прибора	70 x 140 x 35 мм
Размеры основного пояса	410 x 135 мм
Размер растяжной нейлоновой ленты	700 x 38 мм
Приблизительный вес	300 г
Срок службы батарейки	Около 2 месяцев при регулярном использовании прибора 3 x 10 минут в день

Идентификационный номер: 100817097

Производство: Китай