

Vitek®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MANUAL INSTRUCTION

МАССАЖЕР ДЛЯ СПИНЫ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА
CAR MASSAGE MAT



МОДЕЛЬ VT-1780

Теперь и вы можете оценить все преимущества подушки, расслабляющей усталые, растянутые мышцы, снимающей напряжение и обеспечивающей полное расслабление и отдых от наполненных стрессовыми ситуациями будней. Вы можете наслаждаться разными вариантами массажа. Встроенное магнитное поле улучшает кровообращение. Подушка-массажер - это идеальное решение проблем усталости и стресса.

ВАЖНО! ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием подушки "Расслабляющий массажер".

ОПАСНО:

Чтобы уменьшить риск поражения током:

- Всегда выключайте прибор из сети сразу после использования и перед чисткой.
- Не доставайте прибор, упавший в воду. Немедленно отключите.
- Не используйте в душе или во время купания.

ВНИМАНИЕ:

Чтобы уменьшить риск ожогов, пожара, поражения током и телесных повреждений:

- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра. Выключайте прибор из розетки, когда вы его не используете, перед сборкой и удалением деталей.
- Используйте прибор только по назначению. Не используйте не рекомендованные производителем запчасти.
- Не включайте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, неисправный прибор, а также прибор, упавший в воду. Свяжитесь с вашим распространителем и договоритесь о возврате прибора для осмотра и ремонта.
- За прибором необходим особый надзор, если он используется на/возле детей, инвалидов, или лиц с ограниченной подвижностью.
- Не используйте вне помещений.
- Держите шнур вдали от нагреваемых поверхностей.
- Не включайте прибор во время использования аэрозолей, или снабжения воздуха кислородом.

- Будьте осторожны во время использования нагреваемых поверхностей. Возможны серьезные ожоги. Не используйте нагреваемые поверхности на лишенной чувствительности коже, и на местах с плохим кровообращением.
- Если вы находитесь под наблюдением врача и/или вам назначено использование любого медицинского прибора, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом перед использованием прибора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Прибор не требует никакого ухода со стороны пользователя. Если система не функционирует, убедитесь, что:

- 1) Блок питания включен в розетку.
- 2) ШНУР БЛОКА ПИТАНИЯ и ШНУР ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ подключены и закреплены в своих гнездах.


Если возникла любого рода неисправность, свяжитесь с вашим распространителем и договоритесь о возврате прибора для осмотра и ремонта.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Вставьте шнур от пульта дистанционного управления в соответствующее гнездо в подушке.
2. Вставьте шнур от блока питания в оставшееся гнездо в приборе, затем вставьте блок питания в розетку.
3. Лягте на подушку и следуйте дальнейшим инструкциям для ознакомления.
4. В случае использования массажера в автомобиле, подключите его через прикуриватель (12 В).

ПОЛОЖЕНИЕ 5 МОТОРОВ

- 1 мотор в плечевой зоне
- 1 мотор в области низа спины
- 1 мотор в области бедер
- 2 мотора в области ягодиц

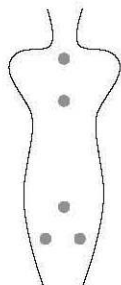


КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕ

- Для включения нажмите кнопку POWER (питание).
- Для выключения нажмите кнопку POWER еще раз.
- Для сброса после того как таймер выключится (через 15 минут) нажмите кнопку POWER.

РАЗНОВИДНОСТИ МАССАЖА

- **ИМПУЛЬСНЫЙ:**
 - вариант, назначенный по умолчанию, массажные моторы периодически включаются и выключаются
 - выберите любую функцию (1-4)
- **ПУНКЦИЯ:**
 - нажмите кнопку PATTERN (разновидность) один раз чтобы включить пункционный массаж
 - выберите любую функцию (1-4)
- **РАЗМИНАЮЩИЙ:**
 - нажмите кнопку PATTERN два раза, чтобы включить разминающий массаж в стиле массажа Shiatsu (шиатсу).
 - выберите любую функцию (1-4)
- **ВОЛНООБРАЗНЫЙ:**
 - нажмите кнопку PATTERN три раза, чтобы моторы начали циркулировать вверх и вниз, создавая ощущение волн
 - выберите любую функцию (1-4)

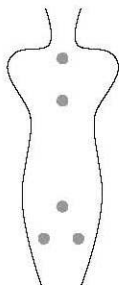

ФУНКЦИИ

- функция, назначенная по умолчанию, последовательность включения моторов:

1 > 2 > 3 > 4 > 5 ...

- нажмите кнопку FUNCTION (функция) один раз, последовательность включения моторов:

1,2,3 > 4,5 > 1,2,3...

- нажмите кнопку FUNCTION (функция) два раза, последовательность включения моторов:
1,2 > 2,3 > 3,4 > 4,5 > 4,5 > 3,4 ...
- нажмите кнопку FUNCTION (функция) три раза, последовательность включения моторов:
3 > 2,4 > 1,5 > 1,5 > 2,4...

ВЫБОР

- Нажмите кнопку SELECT (выбор).
- Изолируйте массирующую область всех разновидностей и функций.

АВТО/ВЫБОР

- Включить выбор: Нажмите кнопку AUTO/SELECT (авто/выбор), выберите режим SELECT (выбор).
- Выключить выбор: Нажмите кнопку AUTO/SELECT (авто/выбор) снова, режим будет меняться согласно выбранной функции.

ИНТЕНСИВНОСТЬ

- Регулирует скорость массажа.
- Нажмите кнопку INTENSITY (интенсивность) для выбора желаемой интенсивности: сильный, средний, слабый.

НАГРЕВ

- Для включения: Нажмите кнопку HEAT (нагрев) (расслабляющее тепло в области спины).
- Для выключения: Нажмите кнопку HEAT (нагрев).
- Когда нагрев включен, горит красный светодиодный индикатор.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

12 В - разъем для подключения к сети автомобиля;

220 В - адаптер для подключения к стационарной сети.

СРОК СЛУЖБЫ МАССАЖЕРА ДЛЯ СПИНЫ НЕ МЕНЕЕ 5-ТИ ЛЕТ